

USER GUIDE

ESTELLE



ELECTROPORACIÓN 5 EN 1 DISPOSITIVO DE BELLEZA FACIAL LED RF

ESRFLDFCDVA

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas precauciones de seguridad y utilice este dispositivo únicamente de acuerdo con las instrucciones descritas en esta guía. Para asegurarse de que puede usar el dispositivo correctamente y evitar daños o lesiones a otras personas, siga estas precauciones.

ADVERTENCIA:

- El incumplimiento de las instrucciones de uso tal y como están escritas en esta guía puede provocar que el dispositivo se dañe.
- Si los usuarios padecen enfermedades físicas, sensoriales y psiquiátricas o se someten a tratamientos dermatológicos, utilice el producto bajo la supervisión de un especialista en piel, un dermatólogo o su médico de cabecera.
- Si el cable de carga está dañado, reemplácelo inmediatamente. No intente reparar.
- No permita que el cable de carga se dañe. Esto incluye, pero no es limitado a permitir que se doble, tuerza, estire, que se le coloquen objetos pesados encima o que se coloque en un lugar de alta temperatura.
- No mantenga el dispositivo cerca de elementos de alta temperatura, como calentadores o llamas
- No sumerja el artículo en agua ni intente lavarlo sumergiéndolo. Este dispositivo no es completamente resistente al agua.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños.

ATENCIÓN:


- Este producto es solo para uso diario. No lo desmonte ni intente repararlo.
- Por higiene, no permita que varias personas compartan este dispositivo. Está diseñado para su uso con una sola persona.
- Si su piel se irrita o duele, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.
- No utilice ni almacene el dispositivo y sus accesorios en lugares húmedos (baños, lavanderías, cerca de duchas, etc.).
- Si el dispositivo está dañado o roto, deje de usarlo inmediatamente. No lo use si no funciona correctamente.



No toque el dispositivo si está en el agua.

Desconecte la alimentación para evitar descargas eléctricas.

VISIÓN GENERAL

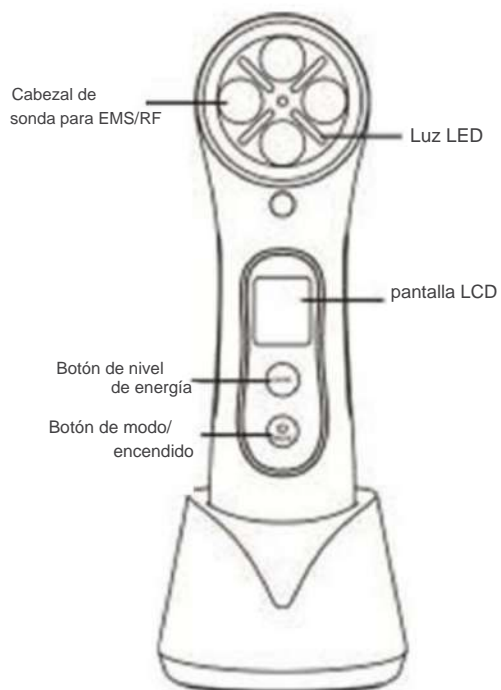

COMPONENTES

- 1 dispositivo de belleza facial.
- 1 base de carga.
- 1 cable de carga USB.
- 1 guía de usuario.

OPERACIÓN

Antes de usar

Asegúrese de que el dispositivo esté cargado durante al menos 2 horas antes del primer uso.

Funcionamiento del dispositivo

Mantenga presionado el botón Modo/Encendido  durante 3 segundos para encender el dispositivo.

La pantalla LCD se encenderá y entrará automáticamente en el modo de limpieza en el nivel 1.

Si no se selecciona ningún otro modo, el dispositivo se apagará automáticamente en 5 minutos, ya que esta es la duración predeterminada del modo de limpieza. Otros modos tienen tiempos predeterminados más largos.

Ajuste del nivel de energía

En cualquier modo, puede presionar el botón Nivel para recorrer las opciones. Los niveles se ordenan del 1 al 5 y se muestran mediante barras en la pantalla LCD.



Pantalla LCD	Nivel de energía
	Nivel de energía: 1
	Nivel de energía: 2
	Nivel de energía: 3
	Nivel de energía: 4
	Nivel de energía: 5

Método de operación

Opere el dispositivo a través de su cara, comenzando desde la barbilla y la línea de la mandíbula, y moviéndose lentamente hacia la frente. En cada área, comience en el medio y muévase hacia afuera con un movimiento hacia arriba. Asegúrese de que la piel esté hidratada para un mejor deslizamiento.

Utilice siempre el producto junto con la esencia facial o la crema hidratante (se vende por separado).

Este dispositivo consigue mejores resultados con geles hidratantes a base de agua. Aplicar la esencia después de su uso.

El uso recomendado es de dos a tres veces por semana.

MODOS



Pulse el botón Mode/Power para seleccionar el modo.

El modo seleccionado se identificará con el icono en la pantalla LCD.

Los cinco modos utilizan RF (radiofrecuencia), EMS (microcorriente), vibración acústica y tecnología de iluminación LED juntas:

Modo	Descripción/Función	Hora predeterminada
Modo limpio LED verde + vibración sónica	Limpia las sustancias nocivas de la piel, reduce la pigmentación, mejora el tono de la piel, acelera la circulación sanguínea y el metabolismo de la piel.	5 minutos
Modo de elevación LED amarillo + EMS + RF	Restaura la flexibilidad de la piel, mejora las arrugas, masajea los músculos y estimula el sistema linfático, redefine la línea de la mandíbula.	10 minutos
Modo de plomo LED rosa + EMS + RF	Crea espacio entre las células en poco tiempo y ayuda de manera efectiva en la absorción de esencias y nutrientes.	10 minutos
Modo antienvjecimiento LED rojo + sónico Vibración + RF	Promueva la regeneración del colágeno de la piel, mejore la vitalidad de la piel, apriete la piel y mejore el tono de la piel.	10 minutos
Eliminar el modo de acné LED azul	Promueva la circulación sanguínea, antiinflamatorio, esterilización, elimine eficazmente el acné de la piel y reduzca los poros.	5 minutos

Una vez que seleccione un modo, la pantalla LCD mostrará un temporizador que hace una cuenta regresiva de la duración del modo. Una vez que se complete el tiempo, el dispositivo se apagará automáticamente.



Para apagar manualmente el dispositivo, mantenga presionado el botón Modo/Encendido durante 3 segundos.

Resumen de funciones:

Función RF (Radiofrecuencia) RF es

una terapia de penetración térmica de alta frecuencia. Transmite un tipo de energía electromagnética causada por un cambio de CA de alta frecuencia al tejido subcutáneo. También puede estimular la regeneración del colágeno de la dermis, aumentando el grosor y la densidad de la dermis. Levantará y rellenará las arrugas, eliminará las cicatrices y restaurará la elasticidad y el brillo de la piel.

Función EMS (Microcorriente) Es

una tecnología especial de método de perforación eléctrica y puede crear en poco tiempo un espacio entre las células para que los componentes líquidos de la esencia puedan ser entregados directamente a la superficie de la piel y la capa dérmica. Garantiza una absorción eficaz de la crema hidratante y facial. esencia.

Función de vibración acústica

Puede masajear y suavizar los músculos, promover la circulación sanguínea, acelerar el metabolismo y tensar la piel.

Funciones LED

Luz verde - Longitud de onda: 520nm (35nm)

Reduce la pigmentación, la decoloración, las pecas, las manchas solares y las manchas de la edad. Mejora y aclara el tono de la piel, el uso continuo puede prevenir el desarrollo de pigmentos.

Luz amarilla - Longitud de onda: 590nm (35nm)

Estimula el sistema linfático y nervioso que regula la elasticidad muscular. El uso regular de luz amarilla puede ayudar a reafirmar la piel y tonificarla mejor.

Luz rosa - Longitud de onda: 700nm (35nm)

Aumenta la circulación sanguínea y mejora el metabolismo, ayuda en la absorción efectiva de productos para el cuidado de la piel.

Luz roja - Longitud de onda: 620nm (35nm)

Promover la regeneración de colágeno, suavizar las arrugas y mejorar la vitalidad de la piel.

Luz azul - Longitud de onda: 465nm (35nm)

Reduce las bacterias que causan la inflamación de la piel, reduce el acné y el enrojecimiento.

CARGA

Estado de la batería

El estado de la batería se muestra en la pantalla LCD con tres cuadrículas en el icono de la batería.

Estado de la pantalla LCD	Batería restante
1 cuadrícula	0-30%
2 cuadrícula	30%-70%
3 rejilla	70%-100%

cargando

- Cuando la batería esté baja, el icono de la batería comenzará a parpadear. Recomendamos cargar al 100% (tres rejillas completas, ya no parpadea) antes de seguir usándolo.
- Conecte el cable de carga USB a la base de carga. Conecte el cable a cualquier adaptador USB apropiado (5 V, 500 mA) o puerto USB.
- El icono de la batería parpadea durante la carga.
- Cuando la carga esté completa, el icono de la batería dejará de parpadear y permanecerá fijo.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- No sumergir en agua. No use agua para limpiar este dispositivo directamente.
- No limpie mientras esté conectado directamente al cargador USB.
- Después de la operación, use papel, toallas o un paño seco y suave para limpiar la cabeza del dispositivo.
- Cuando la suciedad sea difícil de quitar, intente usar un paño ligeramente húmedo para limpiar.
- Si no utiliza el dispositivo durante mucho tiempo, se recomienda que lo cargue regularmente y lo guarde en un lugar fresco y seco.
- El dispositivo no es completamente impermeable; por favor, no use agua para limpiar el instrumento para evitar daños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas comunes y soluciones

Tema	Solución de problemas
No sentir el dispositivo en la cara	Asegúrese de que el dispositivo se sostenga con la cabeza paralela a su cara.
	Ajuste la potencia de la energía.
El dispositivo no enciende	Carga de batería insuficiente. Cargue el dispositivo.
El nivel de energía no está disponible.	Partes internas del dispositivo dañadas.
	Botón atascado.

Si todavía tiene problemas, o si su dispositivo no funciona como debería, deje de usarlo y comuníquese con help.kogan.com para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de carga 3,7 V, 100 mA

Horas de carga 2 horas

Capacidad de la batería 3,7 V, 830 mAh

Frecuencia de vibración 8600 (\pm 10) rpm

Peso neto 135g

Base de carga CC 5V 500mA

¿Necesitas más información?

Esperamos que esta guía del usuario le haya brindado la ayuda necesaria para una configuración sencilla. Para obtener la guía más actualizada para su producto, así como cualquier asistencia adicional que pueda necesitar, ingrese en línea a help.kogan.com

The logo for Kogan, featuring the word "kogan" in a lowercase, sans-serif font. The letter "o" is stylized with a power symbol (a circle with a vertical line) inside it.